

HNO-Behandlungsstühle

# ATMOS Chair

## Comfort | Professional

Das zentrale Element im Workflow



PATIENTENSTÜHLE, ARZTHOCKER

# Behandlungsstühle

Kombination von Design, Technik und Komfort

Das zentrale Element in einem HNO-Behandlungsraum ist der Patientenstuhl: Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Patienten darauf sicher und wohl fühlen – mit einem ATMOS Chair. Durch ihre weiche und extrem strapazierfähige Oberfläche setzen unsere Stühle neue Standards – und das zu einem attraktiven Preis. Sie zeichnen sich durch modernstes Design und tolle Haptik aus. Der dazugehörige Arzthocker erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen und ermöglicht ein leichtes Anpassen für eine optimale Patienten-Arzt-Positionierung.



PATIENTENSTUHL

# ATMOS Chair Comfort

Basic & Sync

Die Basisausführung ATMOS Chair Comfort ist der optimale Behandlungsstuhl für die tägliche Arbeit in Ihrem HNO-Behandlungsraum.



## ATMOS Stoffprägung

Ein besonderes Highlight stellt die Logo-Prägung in der Rückenlehne dar. Es ist ein dezenter Hinweis auf die exklusive und hochwertige Fertigung des Stuhles in Handarbeit.



## Klappbare Armlehne

Die Armlehnen bewegen sich synchron mit der Rückenlehne und sind einzeln abklappbar. Der Patient kann somit optimal erreicht werden.



## Variable Fußstütze

Die Fußstütze ist je nach Anforderung über eine Lasche ausklappbar oder integriert sich nahtlos in das Design des Stuhles.



## Flexible Kopfstütze

Die Kopfstütze ist mit einem einfachen Handgriff einstellbar. Auch sehr große Patienten können so entspannt im Stuhl sitzen.



## Synchrone Verstellung

Rückenlehne und Beinauflage sind auch über die Waagerechte hinaus synchron verstellbar. Dies sichert im Bedarfsfall eine schnelle Kollapslagerung.



## Hydraulische Höhenverstellung

Die Höhe des Stuhles wird mit dem Fuß einfach über einen Pumphebel geregelt. Sie haben während der Behandlung die Hände frei.



PATIENTENSTUHL

# ATMOS Chair Professional

Basic, Electrical, Mobile, Complete

Die neue Produktlinie ATMOS Chair Professional glänzt durch ein neues, modernes Design.



## 360° Drehbarkeit

Das Stuhloberteil ist um 360° drehbar und dank beidseitig angebrachtem Arretierungshebel in jeder Position fixierbar. Bei der elektrischen Liegeflächenverstellung ist die Drehbarkeit auf ca. 330° beschränkt.



## Elektrische Höhenverstellung

Der Stuhl ist in einem Bereich von 30 cm höhenverstellbar. Die Verstellung erfolgt über einen integrierten oder separaten Fußschalter.

## Elektrische Rückenlehne

Die Rückenlehne des ATMOS Chair Professional ist stufenlos von ca. 7° Vorneigung bis zur 90° Kollapslagerung einstellbar.

Die Armlehnen sind einzeln klappbar und bewegen sich synchron mit der Rückenlehne.



## Drehbare Sitzfläche

Auf der optional erhältlichen drehbaren Sitzfläche kann der Patient schnell um 90° nach links oder rechts gedreht werden, ohne die Ausrichtung des kompletten Stuhles zu ändern.



## Mobilität

Dank der integrierten Rollen wird eine uneingeschränkte Mobilität erreicht. Der komplette Stuhl kann ohne große Anstrengung bewegt oder bei Bedarf auch ganz aus dem Behandlungsraum geschoben werden.



ARZTHOCKER

# ATMOS Chair Doctor

Handverstellung, Fußverstellung

Die ATMOS Chair Doctor Arztthocker bieten optimale Voraussetzungen für eine möglichst rückschonende und ergonomische Arbeitshaltung.



## Innovatives Material

Das „Compact“-Material der ATMOS Chair Produkte ist in sechs Standardfarben verfügbar und bietet eine zuverlässige Unterstützung im klinischen Alltag.

Es zeichnet sich durch eine angenehme Haptik und eine hohe Strapazierfähigkeit aus. Die getestete Abriebfestigkeit liegt über dem Durchschnitt vergleichbarer Materialien. Das verwendete Kunstleder unterstützt einen komfortablen Sitz – auch bei längerer Nutzung.



## Saubere Fußverstellung

Durch einfaches Tippen auf die ringförmige Bodenplatte kann die gewünschte Sitzhöhe eingestellt werden. Die Hände bleiben frei.



## Verstellbare Armauflage

Die Rückenlehne der ATMOS Chair Doctor kann gedreht und zur Armauflage umfunktioniert werden.



## Klassische Handverstellung


In der altbewährten Variante wird durch leichtes Ziehen am Handhebel die Sitzhöhe verstellt.



PATIENTENSTÜHLE, ARZTHOCKER

# Gesamtüberblick

ATMOS Chair Comfort, ATMOS Chair Professional, ATMOS Chair Doctor

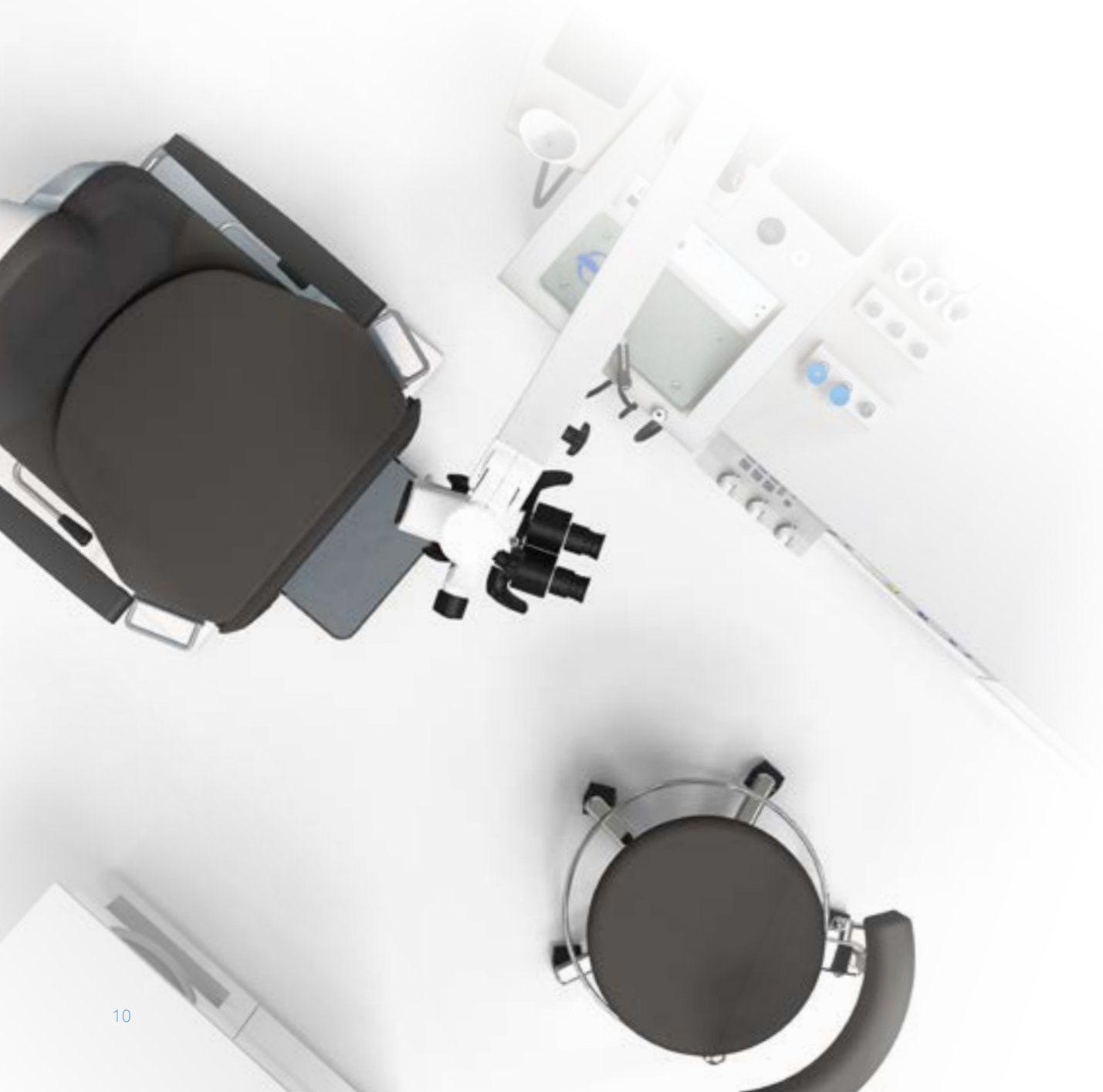


ATMOS Chair	Comfort Basic	Comfort Sync	Professional Basic	Professional Electrical	Professional Mobile	Professional Complete
Einstiegsitzhöhe	56 cm		58 cm			
Sitzhöhe verstellbar	manuell		elektrisch			
Sitzfläche drehbar	-		optional			
Max. Hublast	200 kg		220 kg			
Rückenlehne verstellbar	manuell		manuell	elektrisch	manuell	elektrisch
Fußstütze	fix	synchron mit Rückenlehne	synchron mit Rückenlehne			
Mobilitätsfunktion	-		-		✓	

## Innovatives Bezugsmaterial

Weiches Kunstleder garantiert höchsten Sitzkomfort

- Sanfte Haptik
- Einfach zu reinigen
- Sehr strapazierfähig und abriebfest (bis zu drei Mal höher als bei herkömmlichen Materialien)

### Standardfarben ATMOS Chair

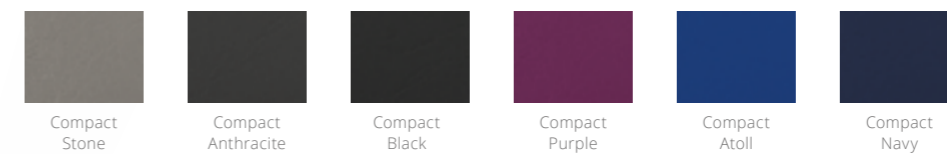



**MedizinTechnik**



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel: +49 7653 689-0

info@atmosmed.de



GREINER GmbH

Wettestraße 1

74385 Pleidelsheim / Deutschland

[www.atmosmed.com](http://www.atmosmed.com)