

Sillones para tratamientos de otorrinolaringología

ATMOS Chair Comfort ATMOS Chair Professional

El elemento central de trabajo



SILLONES PARA PACIENTES Y TABURETES PARA DOCTOR

Sillones para tratamiento

Combinación de diseño, tecnología y confort

El elemento central de una consulta de otorrinolaringología es el sillón para pacientes: asegúrese de que sus pacientes se sientan seguros y cómodos con un sillón ATMOS Chair.

Gracias a su superficie blanda y extremadamente resistente, nuestros sillones establecen nuevos estándares y a un precio atractivo. Destacan por un diseño más moderno y una magnífica sensación al tacto. El taburete para doctor correspondiente cumple todos los requisitos relevantes para la seguridad y permite una fácil adaptación para garantizar una posición óptima paciente-médico.



SILLÓN PARA PACIENTES

ATMOS Chair Comfort

Basic y Sync

La versión básica de ATMOS Chair Comfort es el sillón para tratamientos óptimo para el trabajo diario en su consulta de otorrinolaringología.



Estampado en relieve de ATMOS

Un punto destacado es la estampación del logo en el respaldo. Es una insinuación discreta de la fabricación a mano exclusiva y de alta calidad del sillón.



Reposabrazos abatible

Los reposabrazos se desplazan de forma sincrónica con el respaldo y se pueden abatir individualmente. Así se puede acceder al paciente de forma óptima.



Reposapiés variable

El reposapiés, según el modelo, se puede extraer mediante una lengüeta o se integra sin costuras en el diseño del sillón.



Reposacabezas flexible

El reposacabezas se puede ajustar con un sencillo asidero. Los pacientes más altos también pueden sentarse relajados en el sillón.



Ajuste sincrónico

El respaldo y el reposapiernas también se pueden ajustar de forma sincrónica hasta llegar a la horizontalidad. Lo que garantiza, en caso necesario, un cambio rápido a la posición de insuficiencia cardiocirculatoria.



Ajuste hidráulico de altura

La altura del sillón se regula fácilmente con el pie mediante una palanca hidráulica. Así durante el tratamiento las manos están libres.



SILLÓN PARA PACIENTES

ATMOS Chair Professional

Basic, Electrical, Mobile y Complete

La nueva línea de productos ATMOS Chair Professional destaca por un diseño nuevo y moderno, y gracias al innovador material de revestimiento «Premium» logra un nuevo nivel de confort.



Capacidad de giro de 360°

La parte superior del sillón se puede girar 360° y se puede fijar en cualquier posición gracias a su palanca de bloqueo montada a ambos lados. Con el ajuste eléctrico de la zona reclinable, la capacidad de giro se limita a 330° aproximadamente.



Ajuste eléctrico de altura

La altura del sillón se puede ajustar en un margen de 30 cm. El ajuste se realiza a través de un interruptor de pedal integrado o aparte.

Respaldo eléctrico

El respaldo de ATMOS Chair Professional se puede regular de forma continua desde unos 7° de inclinación hacia adelante hasta unos 90° en la posición de insuficiencia cardiocirculatoria.

Los reposabrazos se pueden abatir individualmente y se desplazan de forma sincrónica con el respaldo.



Asiento giratorio

Con el asiento giratorio opcional el paciente puede girarse rápidamente unos 90° hacia la izquierda o la derecha sin modificar la verticalidad de todo el sillón.



Movilidad

Gracias a las ruedas integradas se consigue una movilidad ilimitada. El sillón completo puede desplazarse sin grandes esfuerzos o, en caso necesario, se puede sacar completamente de la consulta.



TABURETE PARA DOCTOR

ATMOS Chair Doctor

Ajuste manual y ajuste con el pie

ATMOS Chair Doctor ofrece unas condiciones óptimas para proteger la espalda al máximo y garantizar una postura de trabajo ergonómica.



Material innovador

El material de los productos ATMOS Chair está disponible en siete colores estándar. Puede elegir entre las líneas «Compact» y «Premium».

Nuestro material Premium convence por su suave sensación al tacto y cuenta con una gran resistencia al desgaste. La resistencia a la abrasión es tres veces mayor que los materiales convencionales.



Ajuste preciso con el pie

Simplemente pisando la placa de base anular se puede ajustar la altura del asiento deseada. Las manos quedan libres.



Apoyabrazos ajustable

El respaldo de ATMOS Chair Doctor puede girarse y convertirse en apoyabrazos.



Ajuste manual clásico


En la versión clásica, la altura del asiento se ajusta tirando suavemente de una palanca.



SILLONES PARA PACIENTES Y TABURETES PARA DOCTOR

Visión general

ATMOS Chair Comfort, ATMOS Chair Professional y ATMOS Chair Doctor

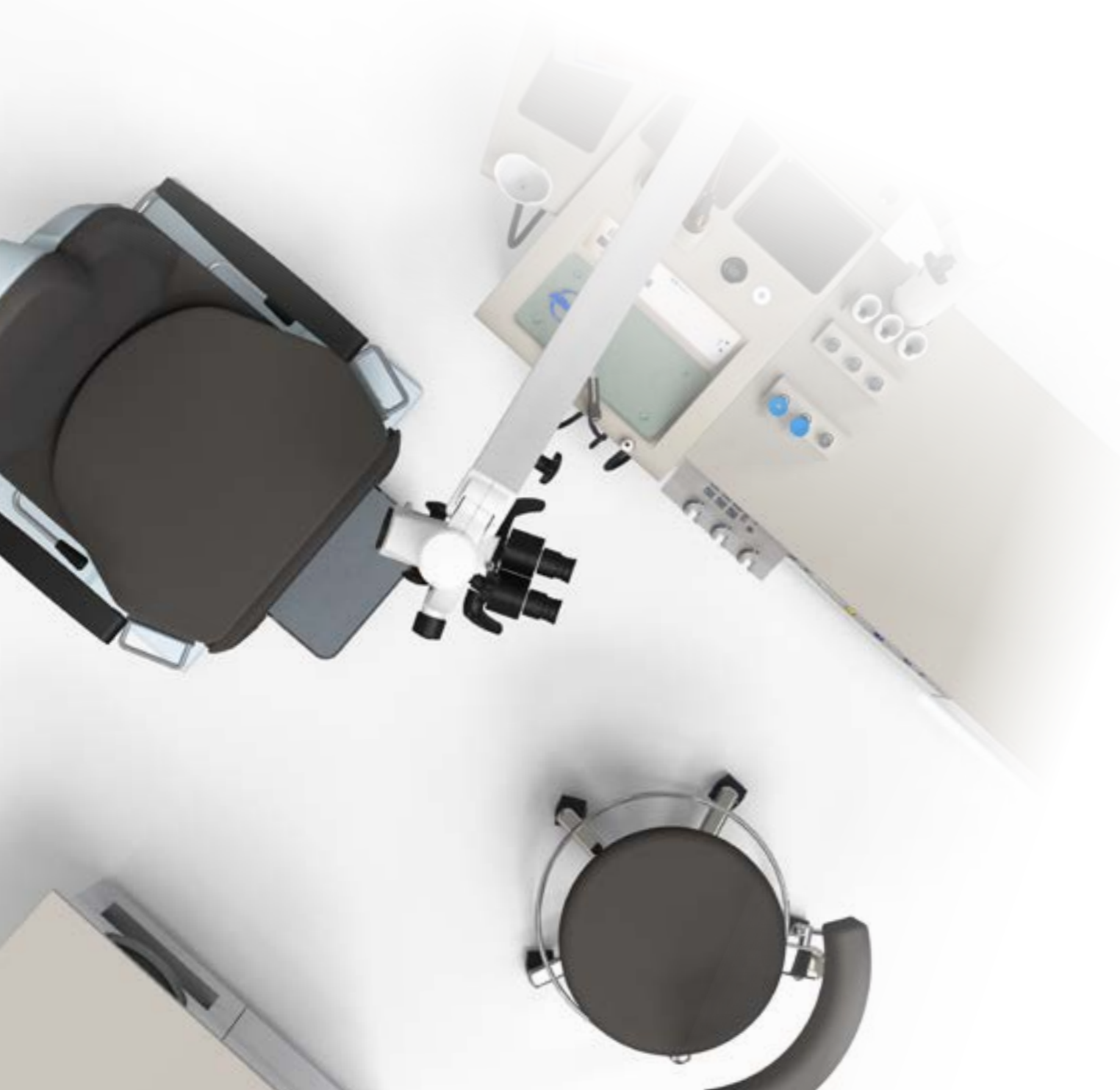


ATMOS Chair	Comfort Basic	Comfort Sync	Professional Basic	Professional Electrical	Professional Mobile	Professional Complete
Altura para sentarse	56 cm		58 cm			
Ajuste de la altura del asiento	Manual		Eléctrico			
Asiento giratorio	-		Opcional			
Capacidad de elevación máx.	150 kg		200 kg			
Ajuste de respaldo	Manual		Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico
Reposapiés	Fijo	Sincronizado con el respaldo	Sincronizado con el respaldo			
Función de movilidad	-		-		✓	

Innovador material de revestimiento


Cuero artificial blando que garantiza el máximo confort

- Suave sensación al tacto
- Fácil de limpiar
- Gran resistencia al desgaste y a la abrasión (hasta tres veces más que los materiales convencionales)

Colores de la línea Compact de ATMOS Chair

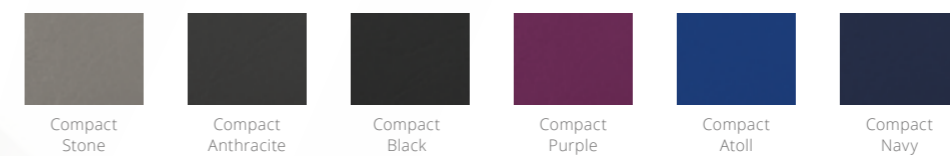

Colores de la línea Premium de ATMOS Chair

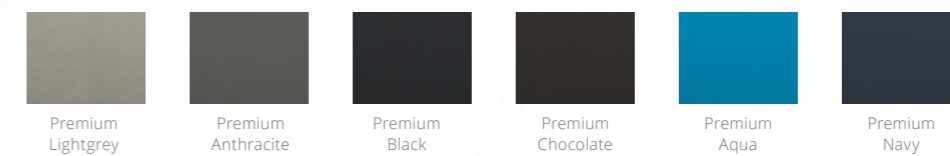



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch/Germany
Tel: +49 7653 689-0
info@atmosmed.com

www.atmosmed.de