



White Edition

ATMOS C 21 Economy
ATMOS C 31 Economy

Kezelőegység, melyben első a funkcionalitás és a képmegjelenítés

*Pontosan, amire
szüksége van*

White Edition

ATMOS C 21 Economy /
ATMOS C 31 Economy

Kompakt kezelőegység Funkcionalitás felsőfokon

Az ATMOS C 21 Economy / ATMOS C 31 Economy egy kompakt, gazdaságos kezelőegységben ötvözi az F-O-G-i munkaállomáshoz szükséges összes funkciót. Helytakarékos integrált kezelőmoduljaik hatékonyabb munkafolyamatokat és nagyobb produktivitást tesznek lehetővé az erőteljes munkafolyamat-optimalizálásnak köszönhetően. Ezenkívül a White Edition időtlen kialakítása tökéletesen illeszkedik bármilyen ambuláns környezetbe, míg a higiénikus munkalap optimális munkakörülményeket biztosít. Ezzel a funkcionális, esztétikus és higiénikus kezelőegységgel mind az orvos, mind a páciens igényei optimálisan teljesülnek.



Teljeskörű ellátás

A SZÉLESKÖRŰEN FELSZERELT MŰKÖDTETŐ TORONYNAK KÖSZÖNHETŐEN

- Az összes fontos kezelési modul a működtető toronyban kombinálva van
- Az automatikus start/stop funkcióval a kiegészítők egyszerű használata, ha a markolatokat kivesszük a tartójukból
- Kényelmesebb és szinte zajtalan környezet a páciens és a kezelőorvos számára a zajcsökkentő anyaghasználatnak köszönhetően

Magas higiéniai teljesítmény

AZ INNOVATÍV MŰSZERMENEDZSMENTNEK KÖSZÖNHETŐEN

- A műszerek védelme a portól, a szennyeződésektől és a felülfertőzésektől a zárt műszerkezelésnek köszönhetően
- Higiénikus munkalap az optimális vizsgálati feltételekért
- Beépített fűthető fiók a műszerek előmelegítéséhez

Időtlen design

A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOKNAK ÉS A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁGNAK KÖSZÖNHETŐEN

- Vonzó, időtlen design
- Korrózióálló, folyadéklepergető és zajcsökkentő hibrid anyag
- Modern LED világítás
- A integrált értékvédelem a zárható műszerszekrénynek köszönhetően!

Munka- folyamat optimalizálás

A FELHASZNÁLÓBARÁT KOMPLETT RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

- Kép- és videoeszközök, valamint digitálisan kompatibilis diagnosztikai eszközök egyszerű csatlakoztatása az ATMOS Capture Suite-nak köszönhetően
- Teljeskörű áttekintés az összes vizsgálati eredményről pillanatok alatt
- Egyedi igényekre szabható kiegészítő bútorok
- Hozzáillő szék és egyéb tartozékok választéka

Működtető torony

Kezelés? Teljeskörűen!

Megkönnyíti a mindennapi munkát: Az ATMOS C 21 / C 31 Economy működtető torony minimalizálja a vizsgálóhelyiségben megtett távolságokat, így jelentősen megkönnyíti az orvos munkáját. Minden kulcsfontosságú kezelőmodul be van építve, hogy helyet takarítson meg, melyeknek lenyűgöző a tartóssága és a könnyű szervizelhetősége. Minden funkció automatikusan elindul, amikor a markolatok kivételre kerülnek tartójukból, és ezt nagyon csendesen teszik, mivel tovább csökkentettük a leadott zajt az előző modellhez képest.

MIKROSKÓP HOZZÁÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS

A White Edition csendes és rezgésmentes SILENT rendszere csendes környezetet teremt, és így koncentrált munkát tesz lehetővé. A kellemes légkörben a páciens és az orvos is profitálhat a megnövekedett komfortnak köszönhetően. A vibrációmentes működtető torony ideális az ATMOS i View mikroszkóp adaptálásához is precíz mikroszkópos vizsgálatot eredményezve. A kezelőegység szabadon elhelyezhető a helyiségben, függetlenül a fal vagy a mennyezet teherbíró képességétől vagy az ablakok okozta szerkezeti korlátoktól.



**Teljeskörű
ellátás**

KARBANTARTÁSMENTES FÉNYFORRÁS

Az akár 50 000 órás élettartamú LED-nek köszönhetően a fényforrás szervizmentes, energiatakarékos és zajmentes marad.



FÜLMOSÓ KÉSZÜLÉK

A fülmosó nem igényel közvetlen csatlakozást a vízhálózathoz. Ehelyett az ATMOS C 31 Economy tárolóedényével rendelkezik, amely a hálózati víz minőségétől függetlenül megbízható használatot biztosít. Alternatív megoldásként az ATMOS C 21 Economy esetében lehetőség van palackos fülmosásra a sűrített levegős pisztolyra csatlakozva.



VÁLADÉKSZÍVÓ

Az alap (40 l/perc) és professzionális (55 l/perc) teljesítményű szívórendszerek csendesen és nagy vákuummal segítik akár a makacs cerumenek eltávolítását. Az automatikus váladéktartály ürítési opció biztosítja a zavartalan munkát. Más gyártók eldobható váladéktartályaival is használhatók.



GYÓGYSZER- PORLASZTÁS

Az egykezes használat, valamint a könnyen cserélhető porlasztófüvőkák megakadályozzák a keresztzennyeződést, és lehetővé teszik az egyszerű porlasztóváltást az egyenes, a forgó fűvőkával ellátott porlasztók és a porfűvő között.



Innovatív rendszerezés

Maximális higiénia és hatékonyság? Zárt műszermenedzsment

A White Edition-höz illő új, élénk fehér kiegészítő szekrény zárt műszertárolást kínál speciálisan az orvosi műszertálcákhoz igazított fiókokkal. Ez nemcsak átfogó védelmet biztosít a por, a szennyeződés és a felülfertőzés ellen, hanem esztétikus és rendezett munkakörnyezetet is teremt. A higiénikus munkalap – elegáns fekete vagy tiszta fehér színben – tökéletes munkaterületet alkot. Ezenkívül a szekrény nyitott tárolóhelye további rugalmasságot kínál, például egy HF vagy RF sebészeti eszköz tárolása számára.

SERVO-DRIVE*

A SERVO-DRIVE elektromos nyitásmechánikának köszönhetően a fiókok könnyedén kinyithatóak a térd, a kézhat vagy a könyök enyhe hozzáértésével. Ez a következőket kínálja:

- A műszerek hatékony védelme a portól és a szennyeződésektől
- Alacsony vibráció nyitás és zárás közben az érzékeny műszerek védelmére

*5 év gyártói garanciával

**FŰTÖTT FIÓK**

A beépített műszerfűtés a test hőmérsékletéhez hasonló hőmérsékletre melegíti a műszereket, így egy magasabb szintre emelve a vizsgáló orvos és a páciens kényelmét. Ez az apró, de jelentős kiegészítés nem csak kellemesebb feltételeket teremt a kezelés során, de a hatékonyságot is növeli a vizsgálatban.

**ÉRTÉKEK VÉDELME**

Kezelőegységünk új szekrénye gyors és egyszerű zárást biztosít, ezáltal megakadályozza a jogosulatlanok hozzáférését a műszerekhez és készülékekhez, így azokat a rendelés végeztével az ATMOS szekrényben biztonságban tudhatja.




Magas
higiéniai
teljesítmény

MŰSZERTÁLCÁK

A műszertároláshoz kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült orvosi tálcák állnak rendelkezésre. A jól átgondolt rendszer 4 kicsi és 6 nagy tálcát tartalmaz.

Speciális tartók a fültölcsérekhez és fogazott tálcák is kaphatók, amelyek nemcsak a keresztfertőzés ellen védenek, hanem a műszerek biztonságos és szervezett tárolását is biztosítják.

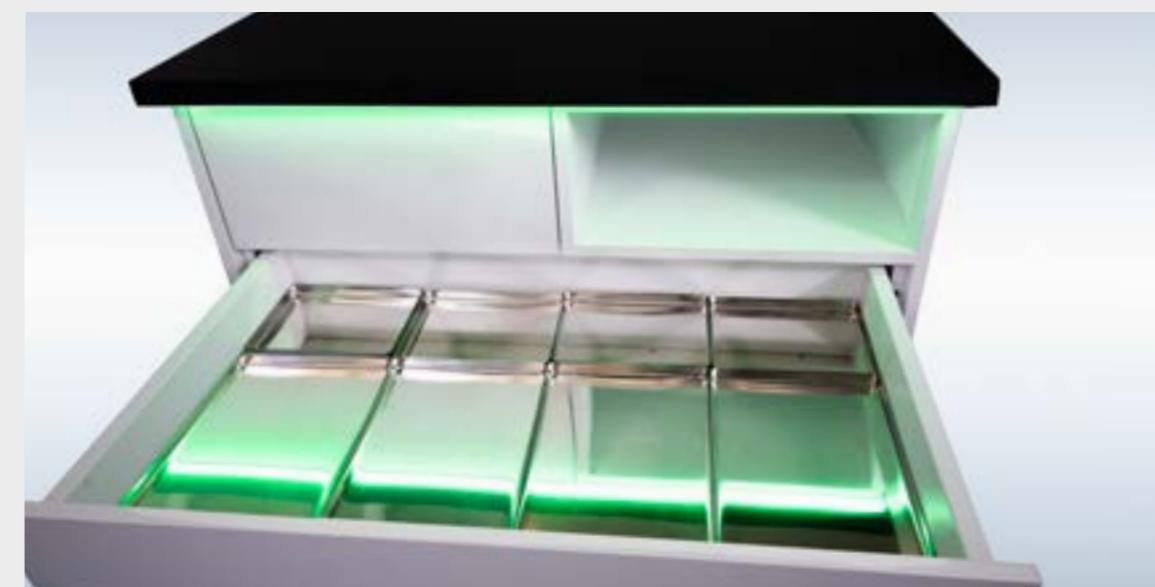

White Edition

Kényelmes környezet

Esztétika a tökéletességben? ATMOS C 21 Economy / ATMOS C 31 Economy

Az ATMOS C 21 Economy / ATMOS C 31 Economy kezelőegység White Edition kezelőegysége a tiszta fehér és a feltűnő fekete lábazat ragyogó kombinációjával időtlen eleganciát és modern koncepciót biztosít a vizsgálóhelyiségekben.

A műszerszekrény munkalapja fehér vagy elegáns fekete színben kapható.

A tetszetős dizájn esztétikusan tetszetős és higiénikus hangulatot teremt, míg az egyedileg állítható LED világítás tökéletes összhangban van a rendelő színeivel. Ez a jól átgondolt kialakítás nemcsak vizuálisan lenyűgöző, hanem nyugodt környezetet is teremt – ideális a betegek és a személyzet számára.




Időtlen
design

MODERN LED MEGVILÁGÍTÁS

A legmodernebb LED világítással felszerelt műszerszekrény bármilyen ambulancia színvilágához könnyedén illeszthető. A lágy tónusoktól a merész színárnyalatokig egyénileg állítható LED-es környezeti világítás ügyesen alakítja a helyszínt, és hívogató környezetet teremt a betegek és a személyzet számára.

**MAGAS MINŐSÉGŰ ANYAGHASZNÁLAT**

A kiváló minőségű anyagokból készült kezelőegység és szekrényei dacolnak a higiéniai kihívásokkal, miközben kellemesen csendes környezetet biztosítanak. A funkcionalitás és a védelem fejlett kombinációja optimális választássá teszi ezt a hibrid anyagot olyan igényes orvosi alkalmazásokhoz, ahol a tartósság és a zajcsökkentés kiemelten fontos.

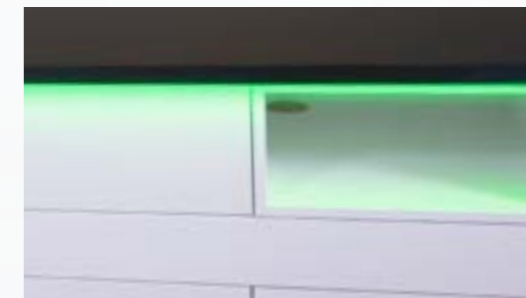**AZ ANYAG JELLEMZŐI****Tulajdonságok**

hangszigetelés



jól fertőtleníthető



alacsony súly



alacsony vibráció



nedvességálló



erős



könnyű tisztíthatóság



formatartó

Előnyök

tartós



újrahasznosítható

Komplett rendszer

Fókuszban a hatékonyság? Tökéletes munkafolyamat.

Gondolt már arra, hogy a munkafolyamat-optimalizálás révén lerövidítse a betegenkénti kezelési időt? Ez most lehetséges a CMES® (kombinált mikroszkóp-endoszkóp rendszer) diagnosztikai csomagunknak és az ATMOS ENT Case Manager-rel* kombinálva. Az innovatív, "360°-Cockpit" könnyed betegkezelést kínál a szakembereknek.

Az ATMOS ENT Case Manager kiemelkedő funkciója a kép- és videoszerek, valamint a digitálisan kompatibilis diagnosztikai eszközök zökkenőmentes integrációjában és központi kezelésében rejlik. Nem csak az aktuális vizsgálatok, hanem a teljes betegtörténet több helyen, praxisban és orvosnál egyetlen kattintással előhívható. Az ATMOS ENT Case Manager nagyobb hatékonyságot biztosít.

* Nemzetközi piaci megjelenés: 2025



ENDOSKÓPOS MEGOLDÁSOK

Endoszkópos megoldásaink növelik a vizsgálat hatékonyságát, és a különféle csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően könnyen integrálhatók bármilyen munkafolyamatba. Az endoszkópos kamera és az ATMOS Scope hatékony optimális, könnyen elérhető közelségében történő elhelyezése a kezelőn szintén hozzájárul a folyamatok optimalizálásához. Az ATMOS ENT Case Manager-nek köszönhetően a vizsgálat képei és videói központilag tárolhatók, egymás mellé helyezhetők és kezelhetők.



info

Ha többet szeretne megtudni a képkötő diagnosztikáról, egyszerűen olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el weboldalunkra:

www.atmosmed.com



MIKROSZKÓP

Az ATMOS i View mikroszkóp olyan kiemelkedő tulajdonságokat ötvöz, mint a fényintenzitás, a mélységélesség és a felhasználóbarátság, és etalont jelent az orvosi képkötésben. Az innovatív szűrőrendszer a H.A.S.I. javítja a kontrasztot és kiemeli a finom struktúrákat, ami jelentősen javítja a diagnosztikai pontosságot és a vizsgálat hatékonyságát.



info

Ha többet szeretne megtudni a képkötő diagnosztikáról, egyszerűen olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el weboldalunkra:

www.atmosmed.com



Munkafolyamat
optimalizálás

info

ATMOS ENT Case Manager

Az ATMOS i View az ATMOS ENT Case Manager része. Komplet, integrálható megoldásunkról bővebb információt a kapcsolódó prospektusban talál.



Olvassa be a QR-kódot és töltsse le a broszúrát!



Kiegészítő termékek

Hiányzik még valami? Nekünk van!

PÁCIENS- ÉS ORVOSI SZÉKEK

A fül-orr-gégészeti kezelőhelyiség középpontjában kétségtelenül a betegszék áll, ahol a betegek nemcsak biztonságban, hanem kényelemben is érzik magukat. Betegszékeink puha és tartós felületükkel új mércét állítanak. Lenyűgözőek modern dizájnjukkal és kiváló komfortérzetükkel. A hozzá tartozó orvosi szék minden biztonsági követelménynek megfelel, és lehetővé teszi a könnyű beállítást a páciens és az orvos optimális elhelyezkedése érdekében.



info

Ha többet szeretne megtudni a beteg- és orvosi székekről, egyszerűen olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el weboldalunkra:
www.atmosmed.com

EGYEDI SZEKRENYMAGOLDÁSOK

Asztalos szakértelmünk az ATMOS Interieur-nél lehetővé teszi számunkra, hogy különleges kéréseket is teljesítsünk.



info

További információ az ATMOS Interieur-ről és az egyedi opciókról:
www.atmos-interieur.de

MŰSZAKI ADATOK

	ATMOS C 21 Economy	ATMOS C 31 Economy
Feszültség	230 V~	230 V~
Áramfelvétel	max. 2,6 A (230 V~) max. 5,2 A (115/127 V~)	max. 5,0 A (230 V~) max. 10,0 A (115/127 V~)
Teljesítményfelvétel	max. 600 VA	max. 1150 VA
Biztosítékok	T 3,15 A / 250 V (230 V~, 50/60 Hz)	T 6,3 A / 250 V (230 V~, 50/60 Hz)

MŰSZAKI ADATOK

Váladékszívó 40 l	nagy vákuum / nagy térfogatáram
• Áramlás	40 l/min ± 10 %
• Vákuum	-90 kPa (@ NN)
Váladékszívó 55 l	nagy vákuum / nagy térfogatáram
• Áramlás	55 l/min ± 10 %
• Vákuum	-98 kPa (@ NN)
Szívócső	
• Belső átmérő	8,0 mm
• Max. hossza	1,9 m
Váladékgyűjtő tartály	1,25 l PP
Sűrített levegő	
• Áramlás	21 l/min ± 10 %
• Nyomás	2200 hPa (szabályozható)
Hidegfényforrás a fénykezelőszekrényhez	
• Megvilágítás erőssége	min. 195 klx (5 cm távolságra egy 4,7 mm fénykábelből) 10 fokozatban 10–100 %-ig szabályozható
• Színhőmérséklet	5500 K ± 10 %
Áramforrás az ATMOS LS 21 LED és ATMOS HL 21 LED-hez	
• Áram	700 mA ± 5 % 10 fokozatban 10–100 %-ban szabályozható
Fülmosó	
• Kapacitás	5,0 l
Endoszkópmelegítő	
• Hőmérséklet	kb. 40 °C
Üzem mód	folyamatos üzem
Zajszint	< 42 dB
Max. üzemmagasság	< 3000 m (NN)
Szennyezettségi szint	2
Túlfeszültségkategória	II
Méret Ma x Szé x Mé	
• Torony	94,0 x 47,0 x 53,5 cm
• Szekrény White Edition	79,0 x 115,0 x 64,0 cm
Súly	
• Torony ATMOS C 21	max. 46,0 kg
• Torony ATMOS C 31	max. 70,0 kg
• Szekrény White Edition	max. 97 kg
Áramütés elleni védelmi osztály (EN 60601-1 szerint)	I
Védelmi osztály	IPX0
CE-jelölőszám	CE 0124



Cikkszámok



506.7530.0: White Edition
Működtető torony élénkfehér színben (szignálfehér RAL 9003)



info

Ha többet szeretne megtudni az ATMOS C 21 Economy / ATMOS C 31 Economy **White Edition** termékről, egyszerűen olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el weboldalunkra:
www.atmosmed.com



506.7215.0: Műszerszekrény - fehér munkalappal

Modern szekrény fehér munkalappal (RAL 9003) és LED világítás. A szekrényhez tartozik egy műszerszekrény zárható fiókkal, tárolórecesszel, hulladékledobóval és használtműszer ledobóval. A szekrényben SERVO-DRIVE-vel ellátott fiókok és fűthető fiók található a műszerek melegítéséhez. Van a széles fiókhhoz 6 db nagy, és 4 db kis rozsdamentes acél műszertálca és egy sín a fűtőlcsérek tárolására.

506.7225.0: Műszerszekrény - fekete munkalappal

A fenti szekrény fekete munkalappal. Illik a működtető torony fekete lábazatához. Mindkét szekrényben SERVO-DRIVE-vel ellátott fiókok és fűthető fiók található.



506.7590.0: Képmegjelenítő rendszer White Edition

A vizualizációs eszköz egyszerű telepítéséhez és csatlakoztatásához.

A rendszer tartalmaz egy orvosi szigetelésű panel PC-t 21"-es érintőképernyővel, a monitor fogantyúját és 2 USB-A portot az ATMOS iQam és az ATMOS Scope számára. A csomagot tartókkal és a működtető toronyhoz való rögzítéssel együtt szállítjuk.

A gyors helyszíni integráció érdekében az alkatrészeket már gyárilag összeillesztik egymással.



506.7090.0: Mikroszkóp oszlophoz rögzítőkészlet White Edition, komplett

Az építészeti feltételektől függetlenül az ATMOS i View mikroszkóp biztonságosan és rezgésmentesen csatlakoztatható egy műszerszekrényhez.



ATMOS Medical Kft

6725 Szeged
Móra utca 15/b

Tel +36 62 499 477
Fax +36 62 499 477
E-Mail info@atmosmed.hu

www.atmosmed.hu



Az ATMOS C 21 Economy / ATMOS C
31 Economy White Edition webhely
eléréséhez egyszerűen
QR-kód beolvasása.