

ATMOS LED Light Cube

LED haute performance




ATMOS LED Light Cube

LED haute performance avec qualité de lumière du jour (5.500 K \pm 10 %)

Souvent, tous les appareils ne sont pas intégrés à l'unité de consultation. Cela rend plus compliquée la gestion des différents instruments. ATMOS vous offre la solution : le nouvel ATMOS LED Light Cube. En modèle de table, il peut à tout moment être placé sur l'unité de consultation déjà existante.

Grâce à la nouvelle technologie LED, il offre une puissance de lumière impressionnante, équivalente à la lumière du jour. Jugez par vous-mêmes la performance de la nouvelle technologie ATMOS LED, comparable à de l'halogène 250 W :

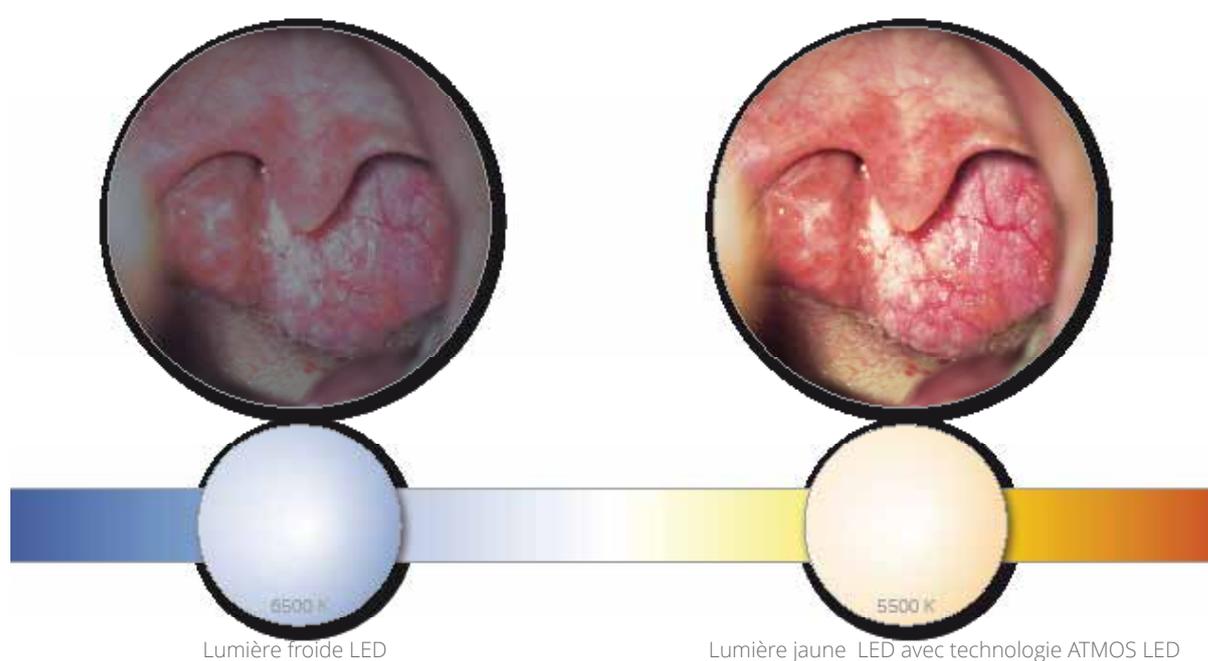

L'ensemble

ATMOS LED Light Cube	REF
ATMOS LED Light Cube	541.2100.0
Accessoires pour ATMOS LED Light Cube	
Adaptateur pour câble de lumière avec connexion ATMOS / Storz	530.6100.0
Adaptateur pour câble de lumière avec connexion Olympus	530.6101.0
Adaptateur pour câble de lumière avec connexion Pentax	530.6102.0
Adaptateur pour câble de lumière avec connexion Wolf	530.6103.0
Adaptateur pour câble de lumière avec connexion ACMI	530.6104.0
Set d'adaptateurs pour câble de lumière	530.6105.0

Les caractéristiques particulières :

LED haute performance

Qualité de lumière du jour avec performance de lumière exceptionnelle de 195 kLux (comparable avec halogène 250 W) grâce à un parcours d'éclairage particulier optimisé. Brevet déposé !



Efficacité énergétique

Avec une consommation électrique économique de 9 Watt, l'ATMOS LED Light Cube atteint une performance qui dépasse celle de l'halogène 150 Watt.

Plus de remplacement de lampes

Grâce à l'exceptionnelle longévité des LED haute performance (50,000 h).



Plus de bruits de ventilation

Grâce à un refroidissement passif.

Allumage automatique des canaux de lumière

Lorsque l'optique concernée est retirée, la source de lumière s'allume automatiquement. Il est également possible de procéder à un allumage manuel.

Système d'adaptateurs flexible

Pour toutes les connectiques courantes (ATMOS/Storz, Wolf, Olympus, Pentax, ACMI).

ATMOS Médical France
3 Allée des maraîchers
13013 MARSEILLE / France
Tél : +33 4 91 44 32 94
info@atmosfrance.fr

www.atmosmedical.fr