



ATMOS Einweg-Absaugsystem

Modernes Flüssigkeits- Auffangsystem für jede Situation

Exactly
what
I need

ATMOS Einweg-Absaugsystem

Ein Absaugsystem. Zahlreiche Möglichkeiten.

Die medizinische Absaugung ist seit mehr als 100 Jahren die Kernkompetenz von ATMOS. Ob im Krankenhaus, im Rettungsdienst oder im Homecare-Bereich, ob elektrische Absaugung oder Absaugung über zentrale Gasversorgung – ATMOS bietet immer eine leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung an. Das neue ATMOS Einweg-Absaugsystem lässt sich optimal mit allen Absauggeräten kombinieren.

SICHERES UND EINFACHES HANDLING

- Einfache Entnahme der gefüllten Absaugbeutel dank zweier Henkel
- Schutz vor Übersaugung und dem Eindringen von Bakterien durch hydrophoben Bakterienfilter



Maximale Flexibilität



MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR ALLE ANWENDUNGEN

- Direkte Befestigung an allen Elektrosaugern mit Geräteträgereaufnahme gemäß der Norm ISO 19054
- Befestigung mit Schienenklammern an jeder Geräteschiene

Einfaches Handling



Patentierter Faltung



PATENTIERTE FALTUNG DER ABSAUGBEUTEL

- Bis zu 60 % kleinere Verpackung
- Geringere Transportkosten bei Anlieferung und innerklinischem Transport
- Niedrigere Lagerhaltungskosten
- Kürzere „Priming time“: sehr einfaches Einsetzen der Absaugbeutel in den Aufnahmebehälter

ATMOS Einweg-Absaugsystem

Ein Absaugsystem. Bewährte Qualität.

Die Aufnahmebehälter sind aus stabilem, hochtransparentem Polycarbonat. Die Absaugbeutel sind aus flexiblem, aber dennoch besonders reißfestem Polyethylen – für eine umweltfreundliche Herstellung und eine rückstandsfreie Verbrennung zu CO₂ und Wasser. Eine vollautomatische Verschweißung mit 100%-iger Dichtigkeitskontrolle verhindert Undichtigkeiten. Bei eingeschaltetem Vakuum saugen sich die Absaugbeutel von selbst fest. Die Entnahme der vollen Absaugbeutel ist durch zwei Henkel besonders einfach.



LANGLEBIGE AUFNAHMEBEHÄLTER

- Stabiler Steg am Geräteträger
- Langer Führungskanal für L-Konnektor
- Autoklavierbar bei 121 °C



ABSAUGBEUTEL AUS POLYETHYLEN (PE)

- Hochtransparent für eine klare Sicht auf den Inhalt der Absaugbeutel
- Flexibles Material garantiert hohe Stabilität und verhindert das Platzen der Absaugbeutel
- Umweltfreundliche Herstellung
- Rückstandsfreie Verbrennung zu CO₂ und Wasser



SERIENSCHALTUNG

- Vergrößerung des Absaugvolumens durch problemlose Serienschaltung



ATMOS Einweg-Absaugsystem

Ein Absaugsystem. Universeller Einsatz.

Aufnahmebehälter und Absaugbeutel sind in 1, 2 und 3 l verfügbar. Der Geräteträger an den Aufnahmebehältern in 30 x 5 mm nach der Norm ISO 19054 ermöglicht die problemlose Befestigung der Aufnahmebehälter an Elektroaugern mit Geräteträgeraufnahme. Schienenklammern ermöglichen die Befestigung an allen üblichen Geräteschienen. Für große Absaugmengen ist eine Serienschaltung mehrerer Aufnahmebehälter möglich. Dabei kann das Geliermittel wahlweise auch erst nachträglich in den gefüllten Absaugbeutel gegeben werden.

INTENSIVSTATION



NOTAUFNAHME / INNERKLINISCHER TRANSPORT




OP / MVZ



ATMOS Einweg-Absaugsystem - Technische Daten

Aufnahmebehälter

Volumen (l)	1	2	3
Durchmesser (mm)	107	107	122
Höhe (mm)	189	342	354
Material	PC	PC	PC
Geräteträger (mm)	30 x 5	30 x 5	30 x 5
Autoklavierbarkeit	bei 121 °C	bei 121 °C	bei 121 °C
Artikelnummer	401.0100.0	401.0200.0	401.0300.0

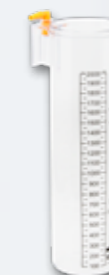

Absaugbeutel

Volumen (l)	1	2	3
Material	PE	PE	PE
Ausgussöffnung	ja	ja	ja
Hydrophober Bakterienfilter	ja	ja	ja
Einlassöffnung (mm)	8-12	8-12	8-12
Packung			
Stück	100	100	70
Größe (cm)	30 x 40 x 45	30 x 40 x 45	30 x 40 x 45
Packungen pro Palette	32	32	32
Artikelnummer Absaugbeutel mit Geliermittel	401.0101.0	401.0201.0	401.0301.0
Artikelnummer Absaugbeutel ohne Geliermittel	401.0102.0	401.0202.0	401.0302.0



Zubehör für ATMOS Einweg-Absaugsystem

	 100x	 20x	 10x	 10x
	Geliermittel für ATMOS-Absaugbeutel	Vakuump-Serienschlauch für ATMOS-Absaugbeutel	T-Konnektor für ATMOS-Aufnahmebehälter	L-Konnektor für ATMOS-Aufnahmebehälter
Artikelnummer	401.0090.0	401.0091.0	401.0092.0	401.0093.0
				
Artikelnummer	HM57522048	HM57522540	HM57522049	HM57525660



MedizinTechnik



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com

Ihr Ansprechpartner vor Ort: