

Кресла медицинские, модели

ATMOS Chair Comfort ATMOS Chair Professional

Центральный элемент рабочего процесса



КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Кресла медицинские

Сочетание отличного дизайна, технологии и комфорта

Медицинское кресло — это ключевой элемент в Вашем оториноларингологическом кабинете. Убедитесь, что ваши пациенты чувствуют себя безопасно и комфортно — с креслом ATMOS. Благодаря своей мягкой и чрезвычайно прочной поверхности был улучшен внешний вид кресла — по весьма привлекательной цене. Кресло выделяется среди кресел других производителей благодаря ультрасовременному дизайну и комфорту, а также отвечает всем требованиям безопасности и может легко регулироваться для оптимизации положения пациента.



КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

ATMOS Chair Comfort

Модификация basic и sync

Кресло ATMOS Chair Comfort basic - идеальный вариант кресла пациента для повседневной работы в кабинете оториноларинголога.



Логотип ATMOS

Логотип, нанесенный на спинку сиденья, добавляет особый штрих. Он тонко передает выдающееся, премиальное качество кресла.



Откидные подлокотники

Подлокотники могут двигаться синхронно со спинкой и по отдельности подниматься и опускаться. Это позволяет легко установить кресло в нужном врачу положении.



Поддержка для ног с возможностью изменения положения

Подставка для ног может либо складываться при нажатии на рукоятку, либо легко интегрироваться в конструкцию кресла.



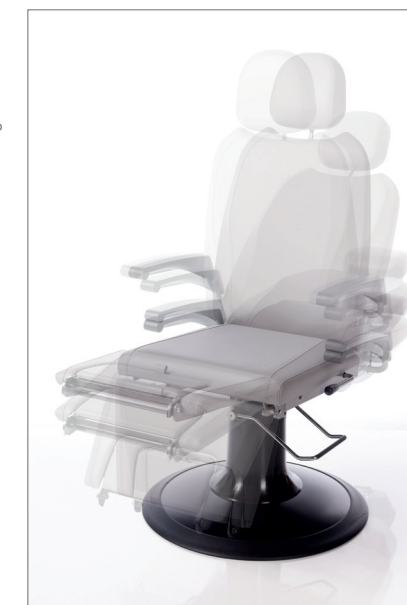
Регулируемый подголовник

Подголовник можно отрегулировать с помощью рукоятки фиксации, что позволяет даже высоким пациентам чувствовать себя в кресле комфортно.



Синхронизированная регулировка

Спинка и поддержка для ног могут перемещаться синхронно. Это позволяет быстро установить кресло в противошоковое положение.



Гидравлическая система для регулировки высоты

Высоту кресла можно легко регулировать с помощью ножной педали. Это позволяет вам сохранять руки свободными во время работы.



КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

ATMOS Chair Professional

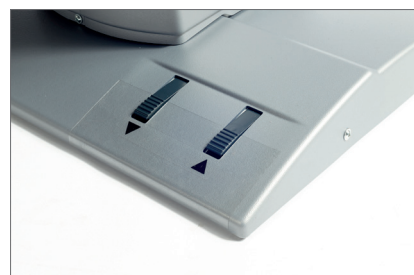
Модификации: basic, electric, mobile, complete

Линия кресел ATMOS Chair Professional привлекает внимание современным дизайном и предлагает новый уровень комфорта благодаря инновационному обивочному материалу «Премиум».



Поворот на 360°

Верхнюю часть кресла можно поворачивать на 360° и фиксировать в любом положении с помощью стопорных рукояток с обеих сторон. Электрическая регулировка горизонтального положения ограничивает поворот до 330°.



Электрическая регулировка высоты

Высота кресла регулируется в пределах 30 см с помощью ножного переключателя, который может быть встроенным или в виде отдельной педали.



Опора для спины с электрическим приводом

Спинка кресел ATMOS Chair Professional может регулироваться от наклона вперед на 7° до противошокового положения 90°.

Подлокотники могут складываться по отдельности и двигаться синхронно со спинкой.



Вращающееся сиденье

Вращающееся сиденье позволяет поворачивать пациента на 90° влево или вправо, не изменяя остальную конфигурацию кресла.



Мобильность

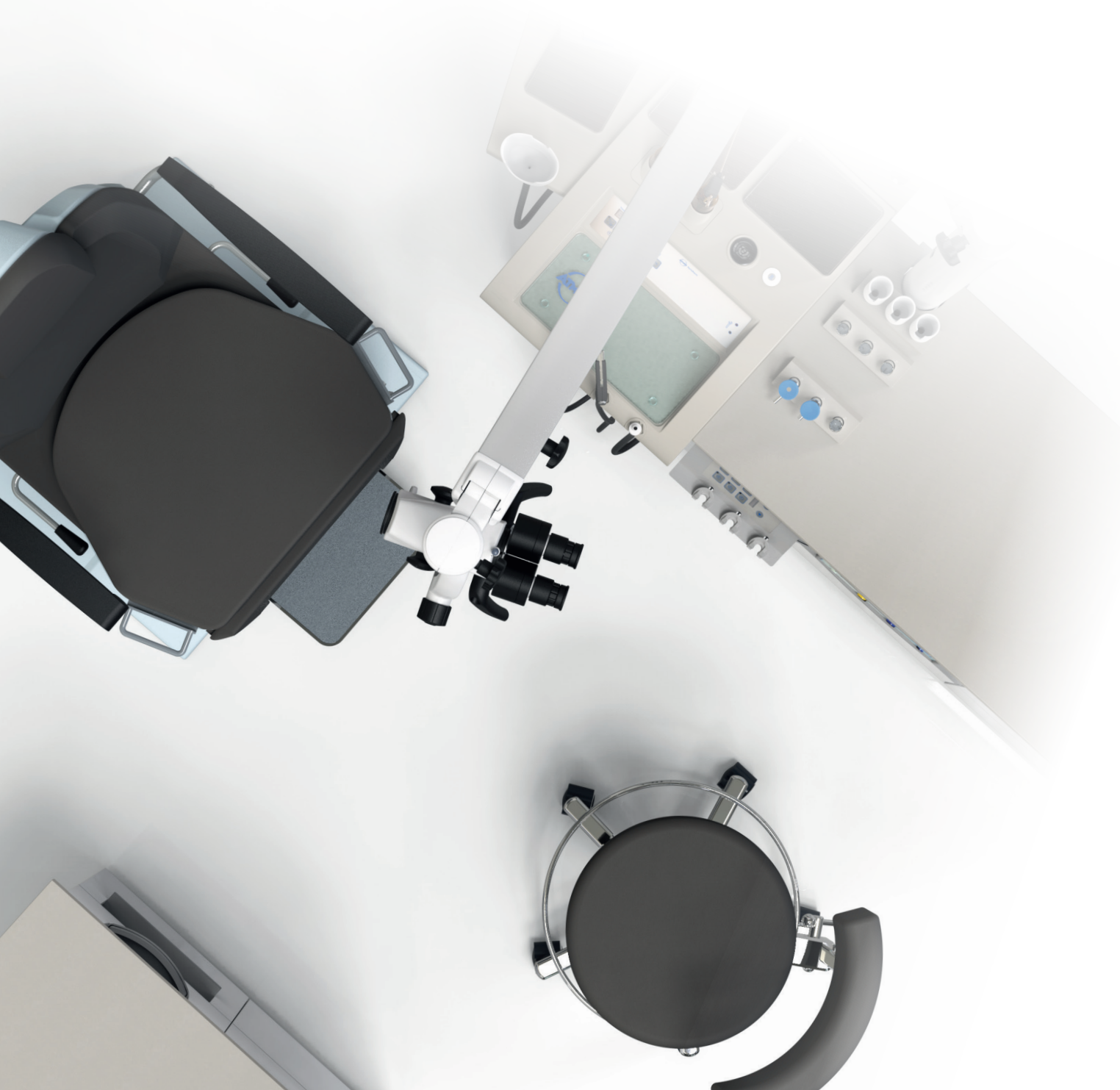
Благодаря встроенным колесикам кресло имеет неограниченную мобильность. Кресло можно переместить с минимальным усилием, или даже выкатить из кабинета оториноларинголога, если это необходимо.



КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Обзор

ATMOS Chair Comfort, ATMOS Chair Professional






ATMOS Chair	Comfort basic	Comfort sync	Professional basic	Professional electric	Professional mobile	Professional complete
Высота сиденья	56 см		58 см			
Регулировка высоты сидения	Гидравлическая		Электрическая			
Вращение сиденья отдельно от спинки	-		Опционально			
Максимальная нагрузка	150 кг		200 кг			
Регулировка спинки	Ручная		Ручная	Электрическая	Ручная	Электрическая
Поддержка для ног	Фиксированная	Синхронно со спинкой	Синхронно со спинкой			
Мобильность	-		-		✓	



Инновационный обивочный материал

- Мягкая искусственная кожа для максимального комфорта
- Мягкий на ощупь
 - Прост в уходе
 - Чрезвычайно прочный и износостойкий (срок службы в три раза выше, по сравнению с обычными материалами)

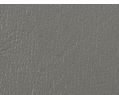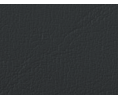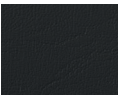ATMOS Chair стандартные цвета

						
Compact Stone	Compact Anthracite	Compact Black	Compact Purple	Compact Chocolate	Compact Atoll	Compact Navy

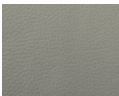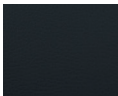ATMOS Chair цвета премиум

						
Premium Lightgrey	Premium Anthracite	Premium Black	Premium Fuchsia	Premium Chocolate	Premium Aqua	Premium Navy



MedizinTechnik

ООО «АТМОС Медикаль»

105005, Россия, Москва,

Посланников пер., д.5, стр.8

Тел. 8-800-707-08-94 (бесплатный по России)

atmosmed@atmosmed.ru

www.atmos-med.ru